

脚踝康复仪

产品使用说明书

生产企业：无锡年欢科技有限公司

【生产备案凭证编号】：

【医疗器械备案凭证编号】：

【产品技术要求编号】：

【本说明书编制日期】：2024年09月02日

目录

生产企业：无锡年欢科技有限公司	1
一、 简介	3
二、 制造商信息	5
三、 产品结构及其参数	6
四、 产品操作方法	6
五、 产品的使用和维护	8
六、 注意事项、警示及提示性说明	9
七、 图形及符号的解释	10
八、 运输及贮存条件	10
九、 生产日期，使用期限或者失效日期	10
十、 脚踝康复仪产品保修	11

一、简介

非常高兴您选择了我们年欢的产品，您的选择表示您对我们的产品充分的信任，对此我们感到万分的荣幸，真诚的希望我们的产品能够给您的生活带去快乐和喜悦。在以后的日子里我们将竭诚为您提供最优质的服务。我们的产品融合了先进的技术水准和现代风格于一体，我们相信，我们的设计理念和智能化的操作方式一定会给您的日常生活带去方便。

您的安全是最重要的。请您在第一次操作本脚踝康复仪之前，务必仔细阅读本说明书中的操作指令并严格执行。这些注意事项完全是为了您的切身利益着想。理解注意事项是安全操作本产品最基本的保障。年欢对由于不安全使用本脚踝康复仪所引起的任何财产和人身伤害概不负责！年欢对任何没有按本手册指令要求或推荐方法操作以及任何其他脚踝康复仪相关要求或本脚踝康复仪自身包含的要求操作所造成的财产、人身的伤害概不负责！

到出版为止，本手册编译了最新的技术规范和产品信息。我公司保留本手册的解释和修改权。我们产品的任何更改都可能会与本手册中的插图、解释以及您已经购买的产品之间存在细微的差异。如果您在安全操作本脚踝康复仪方面遇到任何自己无法解决的问题，或是您认为按照本手册提供的指令和操作方法无法进行安全操作，您都可以向年欢授权的经销商寻求帮助。




警告！ 具体安全事项，请参阅本说明书“注意事项、警示及提示性说明”，并严格执行。

二、制造商信息

注册人/生产企业	无锡年欢科技有限公司			
住所	江阴市东外环路9号E座1001-14			
生产地址	江阴市长山大道55号天安数码城A1-804			
联系方式	电话	135-4527-4213	电子邮箱	JSWXNHKJ@163.com
	邮编	214000	售后服务热线	400-6677-257
售后服务单位	无锡年欢科技有限公司			

三、产品结构及其参数

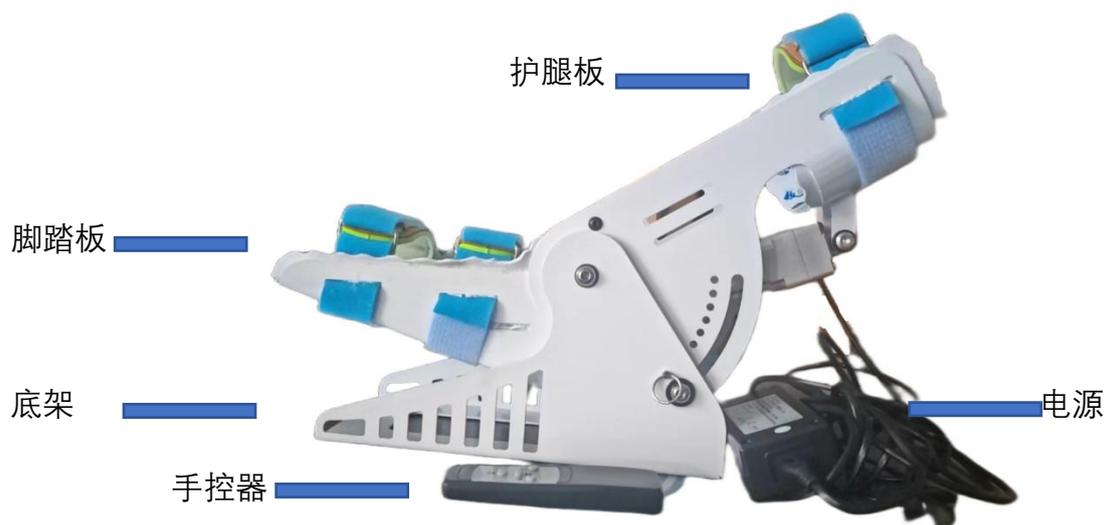

脚踝康复仪 产品结构示意图

产品基本信息

产品名称	脚踝康复仪	产品型号	JHKFY-01 型
产品承重	20kg		
产品结构	脚踝康复仪由底板、脚踏板、护腿板、推杆组成。		
适用范围	用于脚踝无力人群的康复。		
预期用途	1、在医护人员指导下进行康复治疗。		
禁忌症	无。		

产品主要性能技术参数

型号/规格	JHKFY-01 型
长度	940
宽度	650
高度	1440

四、产品操作方法

1、拆箱：产品包装箱内包含机身一台。

2、控制面板（如右图所示）


功能说明：

1 升

2 降

3 常升

4 常降

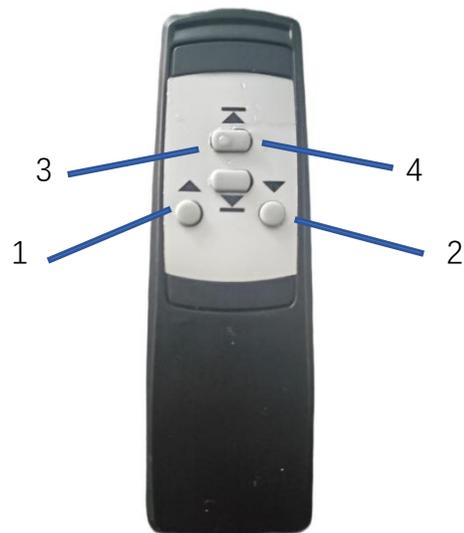

五、产品的使用和维护

使用者的产品维护包括：清洁，更进一步的产品维护交由客服人员，我们建议您：产品每六个月检查一次，每年检修一次。

1、清洁产品与轮胎、电池维护

◆清洁产品

产品表面请使用喷蜡擦亮剂或以干净软布擦拭干净。

2、产品损坏与自我检查

当产品在使用期间故障，请在电源关闭后在进行产品的检查。

症状：完全失去电力，且控制器上的指示灯消失。

检查步骤：

◆检查控制器插头是否有松脱。

◆检查电池箱底部控制器上插头是否松动，请将接头重新安插一次，拔插时请握住插头，不要拽线，以免对线路造成不必要的损坏。

若电源在经上述步骤后，仍不能恢复电力，或操作上述动作时有任何疑问，请立即与客服人员联络。



注 意

控制器有内建诊断装置，可监护控制器，这些元件若发生任何问题，均会显现的控制器上，详细资料请阅读本手册控制器自检诊断清单。

3、维护性检查

以下是产品的检查表，请您依下面建议的频次进行产品检查，有些检查在您坐进或自产品起身时，自动进行检查，为了让您更加注意，我们将这些自动检查的部分列在 A 区。

A 区	每次检查以下各项是否安置妥当： 1、底板 2、脚踏板 3、护腿板 4、控制器
B 区	每月检查下列各项，以免不当的原件松弛或磨损。 螺丝是否松弛、控制器接头
C 区	为了您的安全请每六个月务必对产品进行一次全面彻底的维修检查。

六、注意事项、警示及提示性说明

- 1、使用本产品之前，务必仔细阅读说明书，并按所述要求进行操作。
- 2、建议在医生指导下使用本产品。
- 3、本机使用电源为 220Vac,50HZ。
- 4、本机的电源插座必须有可靠的接地线。
- 5、不使用本机时，请由电源插座拔下插头，拔取时，请子握电源插头部分，切勿拉拔电源线本身。
- 6、机器表面请勿使用汽油和含苯类等挥发性溶剂，可川一般家用中性清洁剂，用软布轻擦。
- 7、本产品如需长距离运输，必须用结实可靠的外包装，内衬 4 mm 以上厚度泡沫软垫。
- 8、本产品应贮存于相对湿度不超过 80%,无腐蚀气体和通风良好的清洁室内。

七、图形及符号的解释

该产品无特殊的标签、标识、图形、符号等

八、运输及贮存条件

◆包装

◎产品包装时按装箱单会配齐所有配套件。配套件会装入配套件箱内或牢固固定在脚踝康复仪的相应零部件上，并用软性填料隔开；配套件箱也会牢固地固定在脚踝康复仪包装箱的底部，并保证运输过程中不产生松动、摩擦和碰撞。

◎脚踝康复仪在包装箱内会牢固定位，产品接触面间会垫有适当厚度的软性填料，防止运输时松动或相互摩擦。

◆运输环境条件

◎产品可用一般交通工具运输，运输中应防日晒雨淋，不得与有毒、有害及腐蚀性物品混装。

◆贮存环境条件:

◎温度-20℃ ~ 45℃。

◎相对湿度不大于 93%。

◎大气压力范围：70kPa-106kPa。

九、生产日期，使用期限或者失效日期

本产品使用年限为出厂之日起五年内，请客户在有限期内使用，超过年限请勿使用，以免发生意外。

生产批号：见产品标签

生产日期：见产品标签

失效日期：见产品标签

十、脚踝康复仪产品保修

◆保修内容

您的脚踝康复仪是我们精心为您量身打造而成的，若有材料或制造上的不妥之处，请依本保修卡所标示的期间及条件，免费修理，终身维护。

◆不适用保修事项

- ◎可认定为无功能上影响的感觉现象。
- ◎使用损耗或因经过一段时间变化而发生不适（涂装面、电镀面、树脂等自然褪色恶化等）。
- ◆因下列事项而发生故障不适于保修
 - ◎未实施公司指定的定期检查整理。
 - ◎不妥或错误的保养整理。
 - ◎使用不同于操作说明书等所示操作方法及超负荷使用（超员、承载量等）。
 - ◎未经本公司允许，私自改造。
 - ◎煤烟、药品、鸟粪、酸性雨、飞石、金属粉等的外在因素。
 - ◎台风、水灾、火灾、地震等的天灾事故。

◆不负担以下所示之费用

◎消耗品及油脂类等的更换，补充之费用（保险丝、各种塑料制品、玻璃制品、润滑油、其他属于此类之物）。

◎检查、调整、给油、清洁作业等所需费用。

◎本公司所指定的定期检查整理费用。

◎未经本公司允许，私自改造。

◎本公司特约维修中心或售后服务网点以外，所产生的修理费用。

◆顾客应遵守以下事项

以下所示是为了能接受保证修理，顾客请必须遵守之义务：

须依照操作手册所示操作方法及式样，正确操作。

执行日常检查。

执行本公司所指定的检查整理。

◆保修受理

须保修时，请将脚踝康复仪产品及保修卡拿到本公司售后服务中心，申请保修，无保修卡无法受理保修。

◆保修与生效

◎本保修卡自购买之日起盖章备案生效。

保 修 卡

经销商：		产品序列号：	
持卡人：	联系电话：	型 号：见标签	
地址：		出厂日期：见标签	
身高：	体重：	控制器位置：	出厂编号：见标签
质量保修：您所购买的产品可以享受以下维修服务： 1、所有零配件在保修期间内，免费维修。 2、终身提供维修服务，上门维修需加收上门费，根据远近费用另计。			
服 务 记 录	时 间	内 容	

注 意：

- 1、如果你的联系方式有所改变，请及时通知我们！
- 2、更换下来的零配件归本公司所有。
- 3、咨询电话：400-6677-257 / 15927139738。
- 4、售后服务时间：周一至周六：8：00-17：00。